

水道水直結型超純水装置
Direct-Qシリーズ 発売10周年記念

お客様感謝 **50% OFF** キャンペーン

Direct-Q UV
キャンペーン特別価格 **¥308,000***

キャンペーン期間：2010年1月18日～3月31日

* Direct-Q UV本体+スターターキットの価格となります



Direct-Q UVのポイント！

水道水につなぐだけで超純水を採水！ 小型で場所をとりません。2台目にも最適。


RO膜
内蔵

水道水直結でもRO（逆浸透）膜を採用

しっかり水道→純水→超純水と精製しています

- つまり…
- ・長期間安定した水質
 - ・頻繁なカートリッジ交換不要
 - ・ランニングコストも抑えられます

水質安定性比較例

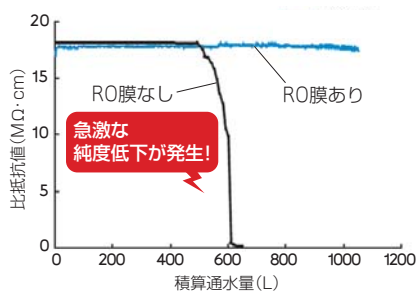

一次処理 (RO膜) の有無による超純水比抵抗値の変動

ランニングコスト比較例

装置	水道水直結型超純水装置 Direct-Q UV	Z社 水道水直結型 超純水装置
特徴	一次処理用RO膜あり	一次処理なし (RO膜なし)
精製フロー	水道水→ RO膜 →イオン交換 →UV→最終フィルター	水道水→イオン交換 →UV→最終フィルター
1年間の ランニングコスト*	約 117,000円	約 273,000円

* 1日5L使用、1ヵ月22日使用での目安

年間差額
約156,000円

185/254nm
UV標準

さらに185/254nmUV内蔵

- だから…
- ・水中の有機物を分解
 - ・安定した水質を達成

他にも

- ・ポットのように簡単採水
- ・必要な量を自動採水
- ・カートリッジ簡単交換 など、メリットたくさん。

FAX

FAX 03-5442-9734

Direct-Q シリーズ 発売10周年記念

お客様感謝50%OFFキャンペーン応募用紙



●仕様

比抵抗値	18 MΩ・cm以上 (25℃)
採水量	0.5 L/min (水温25℃のとき)
サイズ	29 (幅) × 42 (奥行き) × 54 (高さ) cm
重量(乾燥時)	7.5 kg
タンク容量	6 L (実容量約 5.5 L)
電源	100 - 230 V 50/60 Hz 0.7 A
供給水・ 供給水接続口	水道水 1/2"ストップバルブ止め (1/2"PT配管接続または化学水栓(水道蛇口))
供給水圧	0.1 ~ 0.3 MPa

● 枠内の項目にご記入ください(ご記入漏れのないようお願いします)

ご氏名		ご記入日	2010年	月	日
ご所属機関 /貴社名		ご部署名			
ご住所	〒				
TEL		FAX			
E-mail	@				
ミリポアの最新製品/技術/サービス情報をお届けするE-メールニュース「MilliGram」をお送りしてもよろしいでしょうか?			<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ	
販売店名		販売店 ご担当者名			

● 必要事項にチェックをお願いします。 Direct-Q UV ~~¥616,000~~ → **¥308,000** 漏水検知器 ~~¥69,000~~ → **¥34,500**設置作業 要 不要 (設置には別途作業費・交通費が必要となります)

【お客様の個人情報について】日本ミリポアでは、お客様の登録またはその同位の下に得た情報は、以下に掲げる目的のみに使用し、その目的を超えて個人情報を扱うことはありません。 1.日本ミリポアの最新技術/製品/サービス情報を掲載したE-メールニュースレターやダイレクトメールの配信 2.日本ミリポアの商品企画、販売促進活動 3.商品の受注、納品、商品の届け、保守およびこれらに関連する一切の取引活動
*カタログ中の価格には消費税は含まれておりません。このカタログは再生紙・ソイインクを使用しております。

販売店



日本ミリポア株式会社 ラボラトリーウォーター事業本部

〒240-0005 神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134番地
横浜ビジネスパークウエストタワー

製品に関するお問合せ ☎0120-013-148

ミリポアLW <http://www.millipore.com/LW>